

AiAlert™ EXTRA

SELF ADHESIVE HEAT DETECTORS

1. AiAlert™ Extra vorbereiten und ausrichten

- AiAlert™ Extra quer über den Rücken der Kuh, ziemlich weit vorn auf der Kruppe, kurz hinter der Hüfte und am Schwanzansatz anbringen.
- Bei Kühen im Fellwechsel und bei heftigem Schmutz striegeln, um Haare, Brocken usw. sanft zu entfernen.
- Mit dem mitgelieferten Tuch Staub und lose Haare entfernen.
- Bei Temperatur der Erkennungskapsel unter -5°C (23°F) sie vorwärmen (kurze Zeit in einem warmen Raum/ Bereich von mindestens -5°C oder am Körper).



2. AiAlert™ Extra anbringen

Üben Sie dabei keinerlei Druck auf die druckempfindliche Kapsel selbst aus!

- Das Brunsterkennungshilfsmittel so anbringen, dass die Pfeile nach vorn zeigen.
- Das Schutzpapier von der Rückseite abziehen und dabei die Erkennungskapsel im Bereich der Kapsel selbst nicht knicken, und sie wie vorgesehen auf die Kuh legen.
- Auf beiden Seiten die Kapsel durch kräftigen Druck mit den Fingerkuppen Richtung Kopf feststreichen. Beidseits mindestens 5 Sekunden lang Druck ausüben, und das mindestens zweimal wiederholen.
- Schließlich kräftig neben den Spitzen der Kapsel und am ganzen Rand der Fläche festdrücken.



3. Hinweise und Tipps

- Nicht zu kräftig durchstriegeln/-bürsten, da so der Feuchtigkeitshaushalt des Fells gestört würde, was die Hafteigenschaften verschlechtert.
- Nicht auf Signalfarbe oder andere Haarbehandlung (Einweichen, Gießen usw.) setzen.
- Nur auf trockenem Fell der Kuh anbringen.
- Abwägen, ob Hindernisse, z.B. Viehbürsten, an denen die Kuh ihren Rücken reiben und so die Kapsel aktivieren oder abreißen könnte, besser zu entfernen sind.
- Nicht auf der nackten Haut anbringen.
- Bei größeren Kühen für die Kapsel eine Stelle weiter hinten (näher an der Schwanzwurzel) wählen, wo der Bug der aufspringenden Kuh(e) sie tatsächlich erreicht und aktiviert.
- AiAlert™ Extra ist auch zur Erkennung erfolglos Besamter nach drei Wochen geeignet.

AiAlert™ EXTRA

SELF ADHESIVE HEAT DETECTORS

1. AiAlert™ Extra vorbereiten und ausrichten


- AiAlert™ Extra quer über den Rücken der Kuh, ziemlich weit vorn auf der Kruppe, kurz hinter der Hüfte und am Schwanzansatz anbringen.
- Bei Kühen im Fellwechsel und bei heftigem Schmutz striegeln, um Haare, Dreck usw. sanft zu entfernen.
- Mit dem mitgelieferten Tuch Staub und lose Haare entfernen.
- Bei Temperatur der Erkennungskapsel unter -5°C (23°F) sie vorwärmen (kurze Zeit in einem warmen Raum/ Bereich von mindestens -5°C oder am Körper).



2. AiAlert™ Extra anbringen

Üben Sie dabei keinerlei Druck auf die druckempfindliche Kapsel selbst aus!

- Das Brunsterkennungshilfsmittel so anbringen, dass die Pfeile nach vorn zeigen.
- Das Schutzpapier von der Rückseite abziehen und dabei die Erkennungskapsel im Bereich der Kapsel selbst nicht knicken, und sie wie vorgesehen auf die Kuh legen.
- Auf beiden Seiten die Kapsel durch kräftigen Druck mit den Fingerkuppen Richtung Kopf feststreichen. Beidseits mindestens 5 Sekunden lang Druck ausüben, und das mindestens zweimal wiederholen.
- Schließlich kräftig neben den Spitzen der Kapsel und am ganzen Rand der Fläche festdrücken.

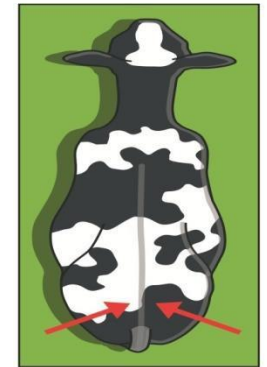

3. Hinweise und Tipps

- Nicht zu kräftig durchstriegeln/-bürsten, da so der Feuchtigkeitshaushalt des Fells gestört würde, was die Hafteigenschaften verschlechtert.
- Nicht auf Signalfarbe oder andere Haarbehandlung (Einweichen, Gießen usw.) setzen.
- Nur auf trockenem Fell der Kuh anbringen.
- Abwägen, ob Hindernisse, z.B. Viehbürsten, an denen die Kuh ihren Rücken reiben und so die Kapsel aktivieren oder abreißen könnte, besser zu entfernen sind.
- Nicht auf der nackten Haut anbringen.
- Bei größeren Kühen für die Kapsel eine Stelle weiter hinten (näher an der Schwanzwurzel) wählen, wo der Bug der aufspringenden Kuh(e) sie tatsächlich erreicht und aktiviert.
- AiAlert™ Extra ist auch zur Erkennung erfolglos Besamter nach drei Wochen geeignet.